

# 200 万画素フル HD デジタルカメラ AR-YW3630



## 1/2 インチセンサー採用

AR-YW3630 は 1/2 インチセンサーを搭載した、高画質なフル HD カメラです。取り付けした顕微鏡での観察映像を、別途モニターに出力して、高画質大画面での観察が可能です。


## カメラ本体に計測機能を搭載

カメラ本体に、二次元計測機能を搭載。特別なソフトのインストール等が必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。




### ◆ 操作画面イメージ

カメラに接続したマウスを画面の端に持っていくと操作パネルが表示されます。

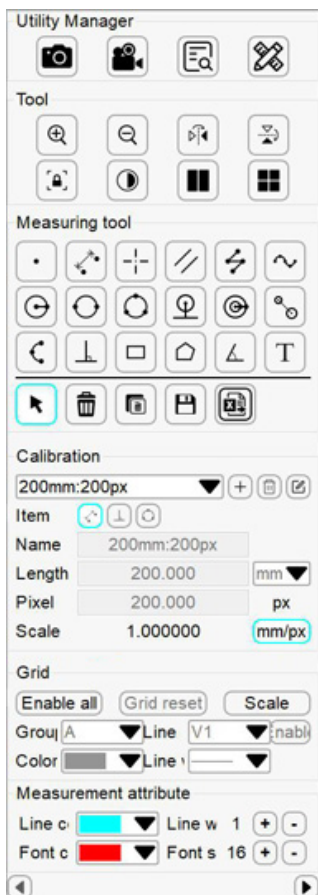

二次元計測機能  
電子ライン表示機能など

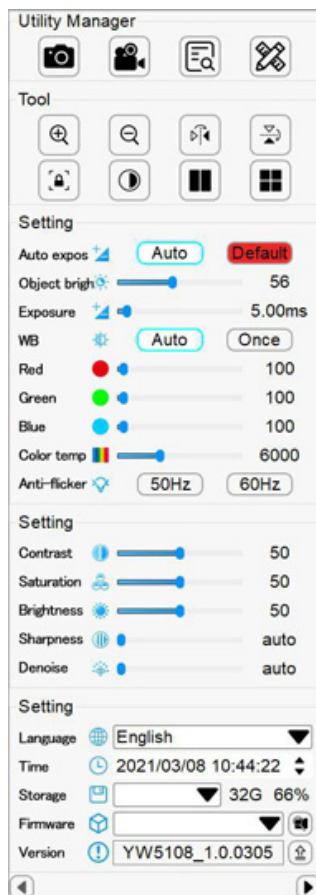

カメラ設定画面

品名	200 万画素フル HD デジタルカメラ
型番	AR-YW3630
価格 (税抜)	98,000 円
製品構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カメラ本体×1</li> <li>・カメラカメラ用 AC アダプター×1</li> <li>・HDMI ケーブル×1</li> <li>・USB メモリー×1 (※試供品)</li> <li>・USB マウス×1 (※試供品)</li> </ul> ※USB ケーブルは付属しません。
有効画素	1,920 × 1,080
撮像素子	1/2 インチ CMOS (SONY IMX385)
ピクセルサイズ	3.75 μm × 3.75 μm
フレームレート	30 fps
インターフェイス	<input type="checkbox"/> HDMI 出力 (1080p) × 1 <input type="checkbox"/> USB2.0 出力 × 2 (操作マウス・USB メモリー接続用) <input type="checkbox"/> UVC 出力 (1080p) × 1
カメラマウント	C マウント
電源	AC100-240V 50/60Hz / DC12V1A (AC アダプター付属)
おもな機能 (HDMI 出力時)	<input type="checkbox"/> 二次元計測機能 <input type="checkbox"/> ズーム表示 <input type="checkbox"/> スケール表示 <input type="checkbox"/> 電子ライン表示 <input type="checkbox"/> 画像反転表示 <input type="checkbox"/> 静止画保存 (BMP/JPEG 選択可) <input type="checkbox"/> 動画保存 (AVI) ※UVC 出力時上記の本体機能はお使いいただけません。
表示言語	英語・中国語 (簡体字・繁体字) の 3 種から選択切替式
オプション製品	液晶モニタ 15.6 インチ 48,000 円 (税抜) 液晶モニタ 11.6 インチ 48,000 円 (税抜)



アームシステム株式会社 <https://www.armssystem.co.jp/> arms@armssystem.co.jp

〒158-0093 東京都世田谷区上野毛 1-27-6-2F TEL:03-5758-1888 FAX:03-5758-1881

本カタログ内製品の仕様・外観については予告無く変更する場合があります。

2021.07