


新製品

ディスプレイ一体型フル HD カメラ AR-YW5612

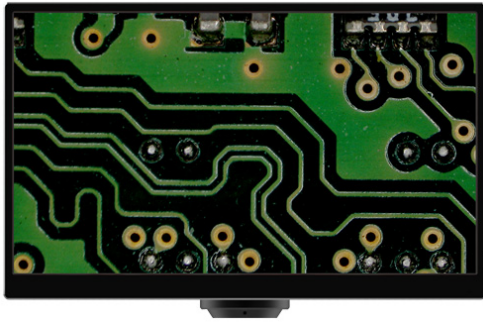


顕微鏡の C マウントに接続したら、すぐ
観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。

本体に二次元計測機能も搭載しているので
特別なソフトのインストールなども必要なく、
マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいた
できます。

HDMI 出力で、さらに大きな外部ディスプレイ
への映像出力も可能です。

◆ 操作画面イメージ


カメラに接続したマウスを、画面の端（右・左いずれか）に
持っていくと、操作パネルが表示されます。
左右どちらに表示させるかは、いつでも切り替えられます。

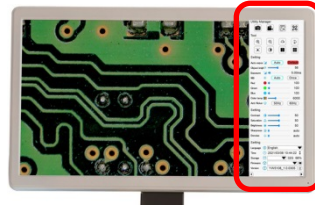


◎ カメラ背面端子部



◆ 操作パネル

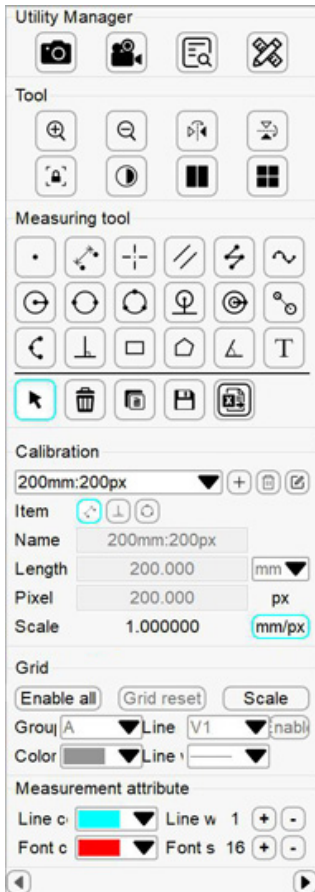

二次元計測機能
電子ライン表示機能など

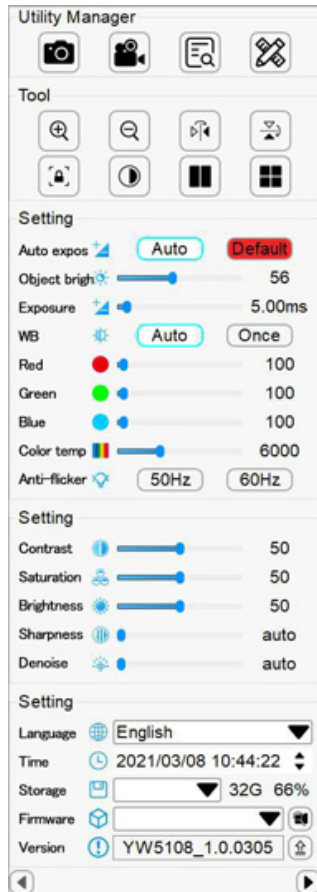

カメラ設定画面

品名	ディスプレイ一体型 フルHDカメラ
型番	AR-YW5612
価格（税抜）	160,000 円
製品構成	<ul style="list-style-type: none"> ・カメラ本体×1 ・カメラ用 AC アダプター×1 ・USB メモリー×1（※試供品） ・USB マウス×1（※試供品）
液晶ディスプレイ	11.6 インチ 1,920×1,080 30fps
カメラマウント	C マウント
インターフェイス	<input type="checkbox"/> HDMI 出力(1,080p) × 1 <input type="checkbox"/> USB2.0 × 2 （操作用マウス・USB メモリー接続用）
カメラ部仕様	有効画素：2,592×1,944 撮像素子：1/2.8 インチ CMOS ピクセルサイズ：2μm×2μm
表示言語	英語・中国語（簡体字・繁体字）の 3 種から選択切替式
おもな機能	<input type="checkbox"/> 二次元計測機能 <input type="checkbox"/> ズーム表示 <input type="checkbox"/> スケール表示 <input type="checkbox"/> 電子ライン表示 <input type="checkbox"/> 画像反転表示 <input type="checkbox"/> 静止画保存 （BMP/JPEG 選択可 2,592×1,944） <input type="checkbox"/> 計測機能内のスクリーンキャプチャでの 静止画保存（JPEG のみ 1,920×1,080） <input type="checkbox"/> 動画保存 （AVI 1,920×1,080 30fps）
電源	DC12V2A/AC100-240V 50/60HZ （AC アダプター付属）

