


二次元計測機能搭載型Cマウントカメラ AR-YWシリーズ

観察画像の保存から簡易二次元計測機能まで、カメラ本体に搭載しているシリーズです。
外部ディスプレイモニターに接続するタイプと、ディスプレイ一体型のタイプをご用意しております。

モニター一体型フルHDデジタルカメラ ① AR-YW5612 価格 180,000円(税抜)




200万画素フルHDデジタルカメラ ② AR-YW3630 価格 120,000円(税抜)

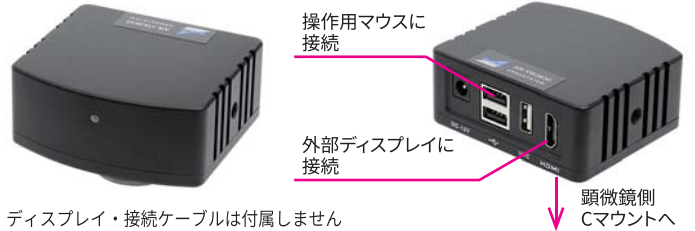

※ ディスプレイ・接続ケーブルは付属しません

Cマウント4Kデジタルカメラ ③ AR-YW5109P 価格 168,000円(税抜)

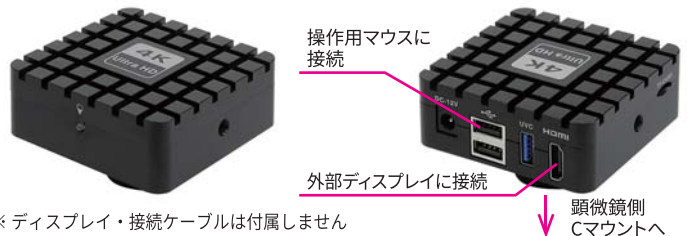

※ ディスプレイ・接続ケーブルは付属しません

操作画面イメージ

本ページ掲載のカメラ三機種①②③に搭載しているソフトウェアの構成と、その操作方法は、すべて共通です。



カメラ本体に接続した操作マウスを画面の左右いずれかの端にもっていくと操作パネルが表示されます。

- ◀ をクリックすると画面左端へ、
- ▶ をクリックすると画面右端へ、
- メニュー表示位置を変更できます

操作パネル

【メニュー切替】計測アイコンクリックで、
計測メニューとカメラ設定メニューを切り替えます

撮影ボタン

補助ツール

スクリーンツール

計測ツール

キャリブレーション

グリッド線

測定特性

撮影ボタン

スクリーンツール

パラメーター設定

画像設定

システム設定

計測描画線文字設定

画像表示方法設定
拡大 縮小
画像反転
フリーズ など

二次元計測
カウント
直線距離計測
面積、角度 など

カメラ設定
露光時間
ホワイトバランス
色温度 など

校正値設定

画質設定
コントラスト
色合い
明るさ など

電子ライン設定

システム設定
言語設定
時刻設定

計測描画線
文字設定